

はじめての電位治療

今日から私も始めます。

軽量小型・簡単操作だから…



世界最小・電位治療器
クラス



4
POINT

マイナス電位&5400Hzの高周波電位

(特許出願中)

小型・軽量・簡単操作！

検電機能を搭載

選べる3つの自動コース

Dr. HYBRID

Dr. ハイブリッド

一般名称：家庭用電位治療器
医療機器認証番号：226AGBZX00042000
販売名：高周波電位治療器 HF1
商品名：Dr. ハイブリッド
機種名：HF1B0

デザイン及び形状は予告無く変更する場合があります。

株式会社 blu owl



通電シート(カバー付)
SIZE: 長さ800×幅300(mm)

① マイナス電位 & 5400Hzの高周波電位

負電位と高周波を組合せた電位治療器。身体のバランスと健康改善を促し、頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘などの予防に効果的。

② 小型・軽量・簡単操作！

テレビを見ながら、横になりながらも、手元で簡単操作。持運びも楽々で、どこでも使用できます。

③ 検電機能を搭載

身体にしっかり電位が掛っている事を調べる検電機能付で、安心して治療ができます。

④ 自動コース

3つの自動コースを装備しました。使用者に合ったコースや生活に合わせたコースを選択できます。




Dr. ハイブリッド


オープン価格

● 高周波電位 (本製品)

※ イメージ図

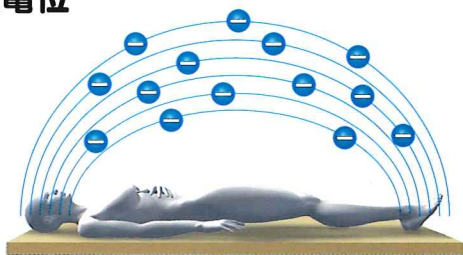

● 低周波電位 (他社製品)

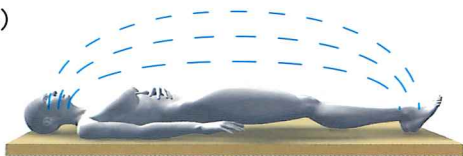

■ 製品仕様

販	売	名	高周波電位治療器 HF1
商	品	名	Dr. ハイブリッド
機	種	名	HF1BO
医療機器製造販売承認番号			226AGBZX00042000
医 療 機 器 の 区 分			管理医療機器
類 別			機械器具(78)家庭用電気治療器
一 般 的 名 称			家庭用電位治療器 (70987000)
サ イ ズ	コントローラー部		長さ220×幅120×厚さ45(mm)
	通電シート		長さ800×幅300(mm)
定 格	周 波 数	50/60Hz	
定 格	電 圧	AC100V	
消 費	電 力	3 W	
出 力	電 圧	600V (実効値)	
出 力	周 波 数	5400Hz	
主な機能	自動コース		連続コース すっきりコース ゆったりコース
	管理機能		検電機能
タ イ マ ー	1～8時間		



株式会社マルタカテクノは、家庭用電気マッサージ器、家庭用エアマッサージ器、家庭用超短波治療器、家庭用低周波治療器、家庭用電位治療器、電位・温熱組合せ家庭用医療機器、低周波・電位組合せ家庭用医療機器、家庭用永久磁石磁気治療器の設計・開発・製造及びアフターサービス(引き取り修理並びにサービスパーツの供給)に対する医療機器における品質マネジメントシステム規格ISO13485:2003年版認証を取得しています。



安全に関する
ご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次のような医用電気機器との併用は、影響を与える恐れがあるので使用しないでください。ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器／人工心肺装置などの医用電気機器／心電計などの装着型の医用電気機器。
- 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている方は使用しないでください。
- お子様やご自分で意思表示のできない人は使用しないでください。
- 次のような場合もしくは身体に異常のある方、または体調のすぐれない方は、医師に相談の上、指示に従ってください。悪性腫瘍のある方／心臓に障害のある方／妊娠初期の不安定期または出産直後の人／体温38℃(有熱期)の人／安静を必要とする人／脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど急性とう(疼)痛性疾患の人／糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人／高血圧の人／不整脈のある人／睡眠時無呼吸症の人／ぜんそくの人。
- 通電中に気分が悪くなったり、身体に異常を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
- 通電シートが濡れている場合には使用しないでください。
- 本品に万一故障などが発生した場合には、直ちに使用を中止し、お買い求め先までご連絡ください。

《製造販売元》

株式会社 マルタカテクノ

静岡県藤枝市八幡字広通550-1 <http://www.marutakatechno.co.jp>

《発 売 元》

株式会社 blu owl

《お客様相談窓口》

0797-89-8186

平日9時～18時受付(土日、祝祭日、当社の休日を除く)

●お取扱店